


Engineering
World
Health

घर | बीवीएम मॉनिटर

BVM Monitor Instructions

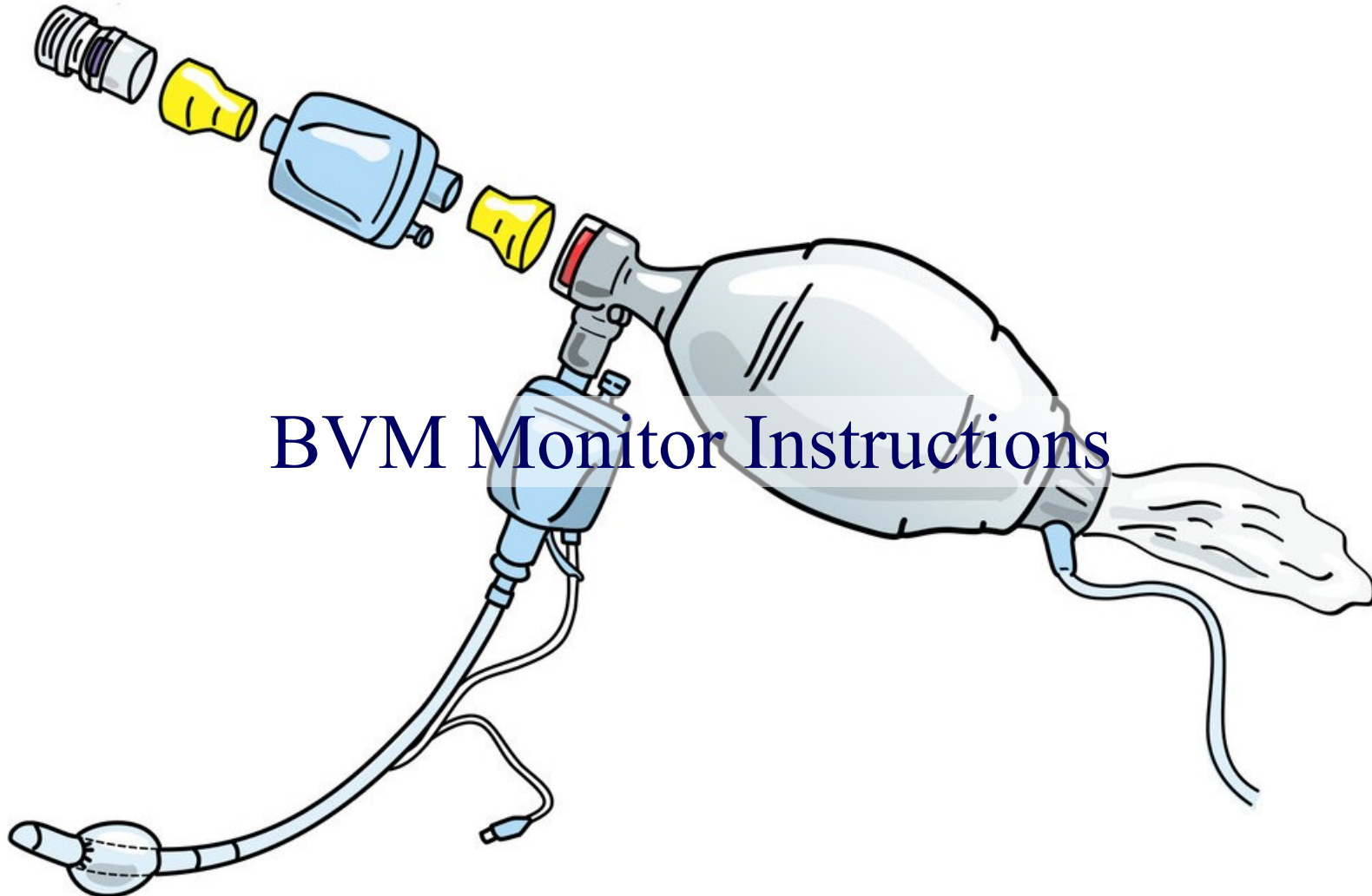

बैग-वाल्व-मास्क मॉनिटर निर्देश

बीवीएम का मॉनिटर डिवाइस से जुड़ा हुआ है और फीडबैक प्रदान करेगा कि क्या शिशु के लिए पुनर्जीवन पर्याप्त है।

यदि पर्याप्त साँसें दी जा रही हैं और यदि उन्हें उचित आवृत्ति पर लागू किया जाता है तो मॉनिटर मापेगा।

मॉनीटर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव को मापता है कि पुनर्जीवन के दौरान नवजात को पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, और यह आवश्यक सांस आवृत्ति का संकेत प्रदान करता है।

यह जानकारी इंगित करेगी कि तकनीक को समायोजित किया जाना चाहिए या नहीं।

लाइट इंडिकेशन की व्याख्या कैसे करें

लाल बत्ती के लिए

- बड़े पवन आइकन का मतलब है कि वेंटिलेशन बहुत अधिक हवा बचाता है।
- छोटे पवन आइकन का मतलब है कि वेंटिलेशन पर्याप्त हवा नहीं देता है।

यदि वेंटिलेशन पर्याप्त हवा नहीं दे रहा है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए जांचें कि शिशु का वायुमार्ग खुला है और चेहरे पर बीवीएम के बीच एक सुरक्षित सील है।

इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि बैग और मास्क ठीक से जुड़े हुए हैं।

चमकती हरी बत्ती वाला घड़ी आइकन प्रति मिनट 50 सांसों की उचित आवृत्ति प्रदान करता है, जिस पर सांसों को लगाया जा सकता है।