


Engineering
World
Health

ఇల్లు | BVM మానిటర్

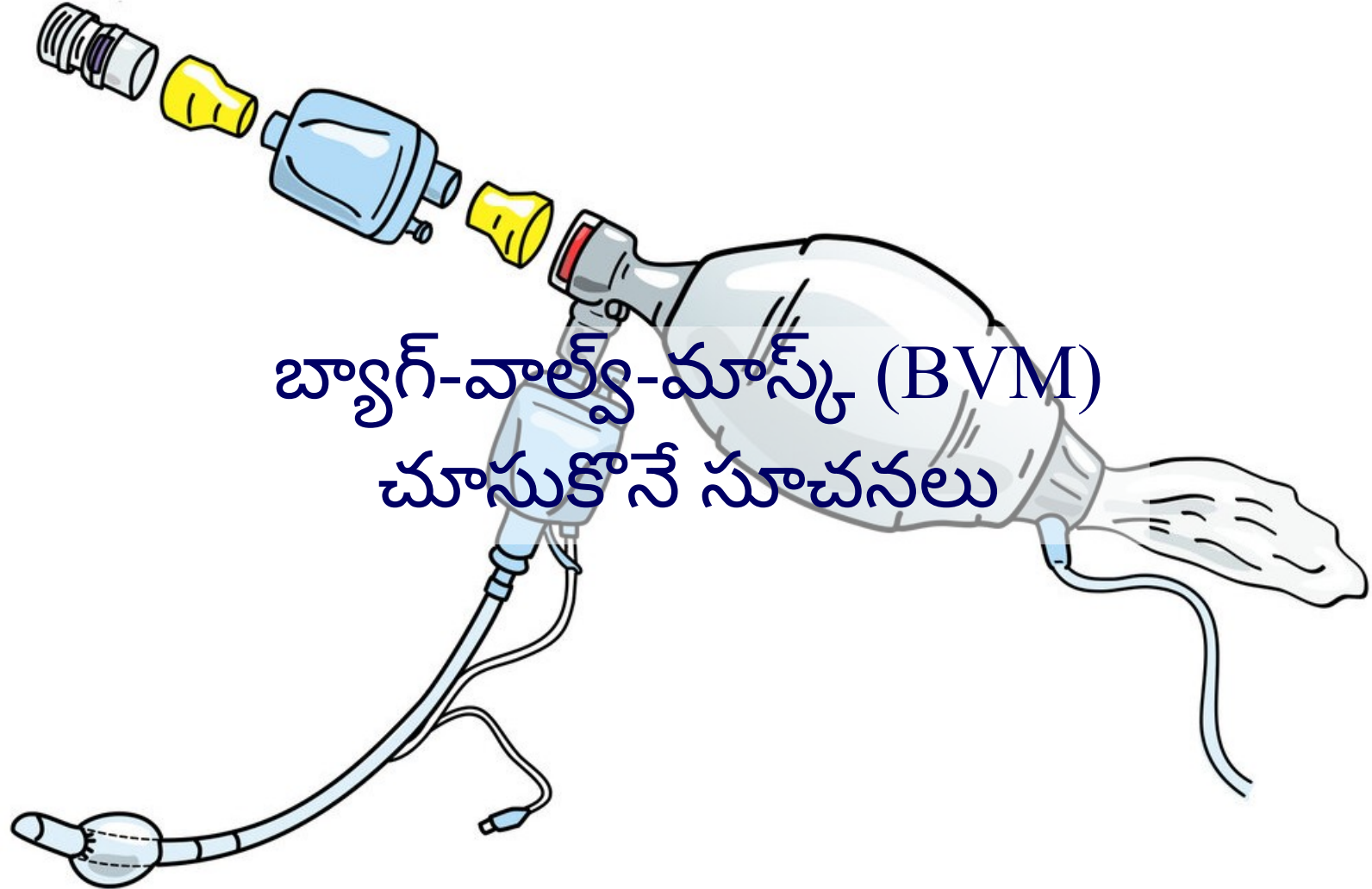

బ్యాగ్-వాల్యూమ్-మాస్క్ (BVM)
చూసుకొనే సూచనలు

బ్యాగ్-వాల్యూ-మాస్క్ (BVM) చూసుకొనే సూచనలు

BVM యొక్క మానిటర్ పరికరానికి అనుసంధానించబడి ఉంది మరియు బిడ్డకు పునరుజ్జీవం సరిపోతుందా అనే అభిప్రాయాన్ని అందిస్తుంది.

తగినంత శ్వాసలు ఇవ్వబడుతున్నాయా మరియు సరైన పౌన పున్యంలో వర్తింపజేస్తే మానిటర్ కొలుస్తుంది. పునరుజ్జీవనం సమయంలో నవజాత శిశువుకు తగినంత ఆక్సిజన్ పంపిణీ చేయబడిందని నిర్ధారించడానికి మానిటర్ ఒత్తిడిని కొలుస్తుంది మరియు ఇది అవసరమైన శ్వాస పౌన పున్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ సమాచారం టెక్నిక్ సర్దుబాటు చేయాలా వద్దా అని సూచిస్తుంది.

కాంతి సూచికలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి

ఎరుపు లైట్ల కోసం

- Wind పెద్ద విండె ఐకాన్ అంటే వెంటిలేషన్ ఎక్కువ గాలిని అందిస్తుంది.
- Wind చిన్న విండె ఐకాన్ అంటే వెంటిలేషన్ తగినంత గాలిని ఇవ్వదు.

వెంటిలేషన్ తగినంత గాలిని పంపిణీ చేయకపోతే, శిశువు యొక్క వాయుమార్గం తెరిచి ఉందో లేదో తనిఖీ చేయండి మరియు ముఖం మీద BVM మధ్య సురక్షితమైన ముద్ర ఉందా. అలాగే, బ్యాగ్ మరియు మాస్క్ సరిగ్గా కనెక్ట్ అయ్యేలా చూసుకోండి.

మెరుస్తున్న ఆకుపచ్చ కాంతితో గడియారం చిహ్నం నిమిషానికి 50 శ్వాసల యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని అందిస్తుంది, దీనిలో శ్వాసలను వర్తించవచ్చు.